

**PENIC**  
**ペニック**

コンドーム式男性用尿器  
CONE-DOME TYPE OF URINE-TAKING EQUIPMENT

'94.12.1

**ALCARE**

**使用説明書**

ご使用前に、必ずお読みください。

## ペニック(コンドーム式男性用尿器)の使い方

特に失禁患者を対象として長期安静療養患者用、寝たきりの老人用に開発された尿器です。常時着用しても不快感が少なく寝たきりで動きの少ない人に最適です。また、ゴム管を接続してベッドの外へ導尿することもできます。

### ■使い方

- ①3種類の採尿器ペニックCから適当なサイズのを蓄尿袋1号に接続します。
- ②蓄尿袋1号を右図のように太腿部に固定し、採尿器ペニックCをペニスにかぶせます。
- ③ペニスの根元に補助バンドを巻き採尿器ペニックCを固定します。


### ■ご注意

- 爪などでキズをつけないように取扱ってください。
- 高熱や直射日光をあてないようにしてください。
- 溶剤や薬液にふれないように注意してください。
- 洗濯の際は中性洗剤をとかしたぬるま湯で洗い、十分に水ですすいだ後、陰干ししてください。

### ■規格

種類	ペニックC-1
規格	採尿器ペニックC (25、30、35mm) 各1コ 蓄尿袋1号 ..... 1コ
商品コードNO.	12721
1箱入数	1セット

※1セットの他に部品だけのご注文にも応じております。

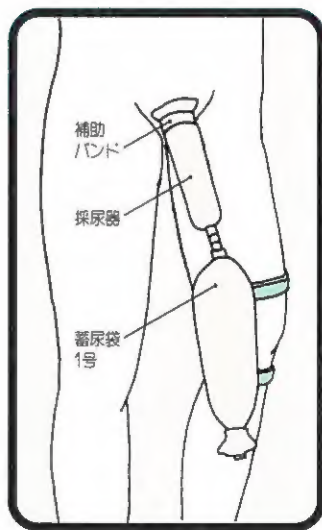

**アルケア株式会社**

〒113 東京都文京区本郷3-40-10

東京営業所/TEL:(03)5684-8078  
北関東営業所/TEL:(03)5684-8079  
東関東営業所/TEL:(03)5684-8098  
南関東営業所/TEL:(045)472-7511

札幌営業所/TEL:(011)261-1721  
仙台営業所/TEL:(022)274-2433  
名古屋営業所/TEL:(052)222-3860

大阪営業所/TEL:(06)337-2985  
広島営業所/TEL:(082)233-8777  
福岡営業所/TEL:(092)441-8372

## ペニックス 取扱上のご注意

ペニックスは、特に失禁者を対象として長期安静療養患者用、寝たきり老人用に開発されたコンドーム式男性用収尿器です。

使用説明書と合わせて熟読の上、本品の特性を十分ご理解してからご使用ください。

### ○ 本品は、ゴム製品です。

極希にゴムが接触することにより、肌に皮膚炎を起こすことがあります。

ゴムアレルギーの方や肌の弱い方は、医師または保健婦と相談し適切な指導を受けてからご使用ください。また、本品の使用によって発疹・発赤・かぶれ・かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

### ご使用前には

#### ○ サイズ選択は、ペニスをスムーズに装着できる小さい方の下限のサイズをお選びください。

小さすぎるとうっ血を起こす原因となり、大きすぎると尿モレの原因となりますので馴れるまでは時々ご確認ください。

#### ○ 収尿器固定用の補助バンドは、締めすぎないでください。

ペニスがうっ血します。

初めて補助バンドを締める方は、約15分間後に一度外し、皮膚の状態を観察してください。

ペニスがうっ血しているようでしたら少しゆるめてください。

### ご使用中には

#### ○ 1日1回必ず収尿器を外し、装着部全体を清拭してください。

装着により発疹・発赤・かぶれ・かゆみ等の症状があらわれた場合、または傷が生じた場合は、装着を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

### ご使用後は

#### ○ 洗濯の際は、中性洗剤をとかしたぬるま湯で傷をつけないように洗ってください。

傷をつけると尿モレの原因となります。

#### ○ 乾燥は日陰干しとし、乾いたらベビーパウダーを全体に塗布してください。

お取扱についてご不明な点は、下記宛までご連絡ください。

アルケア株式会社 マーケティング部

商品相談室

〒113 東京都文京区本郷3-40-10

フリーダイヤル 0120-770175